

MOBILE

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

einfach mobil

autark ohne Strom

klein und federleicht

Attraktiv abrechenbar



**DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON
BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE
IM VERTRIEB DURCH CADITEC**

MOBILE

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

SIMO-SYSTEM


DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC

Das SIMO NPWT-System zur Unterdruck-Wundtherapie unterstützt die Wundheilung wirkungsvoll bei akuten und chronischen Wunden sowie nach chirurgischen Interventionen. Als ausgesprochen kleines und leichtes System ist SIMO sowohl für den stationären Gebrauch als auch für die mobile Unterdruck-Wundtherapie besonders geeignet. SIMO kann vom Patienten dadurch einfach mitgeführt werden und ermöglicht eine kostengünstige Weiterführung der Unterdruck-Wundtherapie.



- Intuitive Bedienung
- Komplettsystem bis zu 30 Tagen nutzbar
- Kontinuierlicher Unterdruck von 125 mmHg
- Keine Exsudat-Behälter erforderlich
- Keine Batterien und kein Stromanschluss erforderlich
- Anzeige des Unterdruck-Status
- Einfaches Erkennen der Notwendigkeit des Verbandwechsels
- Duschen möglich

SIMO-Komplettsystem

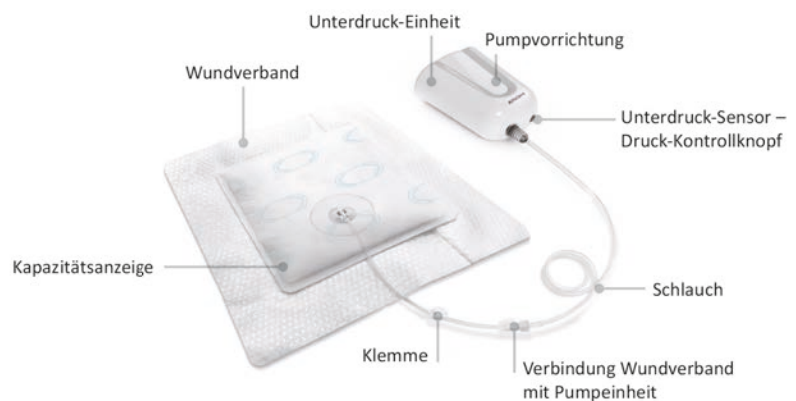

Abdeckung Wundverband


- Atmungsaktiv und Wasserdicht

Absorptionsschicht

- Hohes Absorptionsvermögen

Silikon Wund-Kontaktauflage

- Einfache Positionierung
- Schmerzarter Verbandwechsel

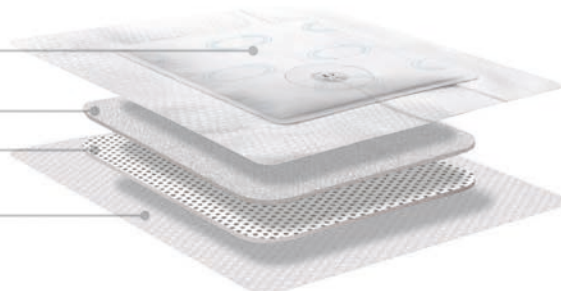


MOBILE


**UNTERDRUCK-
WUNDTHERAPIE**

ANWENDUNG


DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC

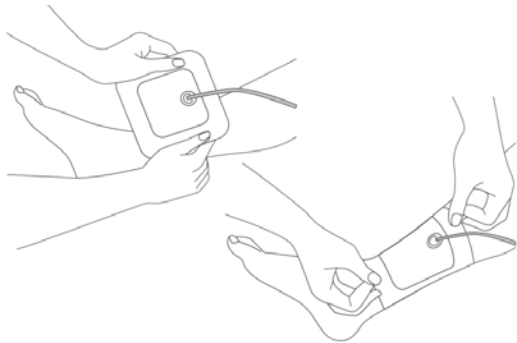


Entfernen des Schutzpapiers und positionieren des Wundverbands zentral über der Wunde

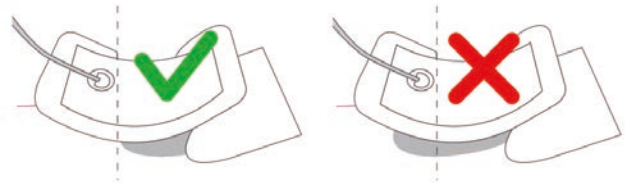


Den Drainageport nicht auf der Wunde positionieren

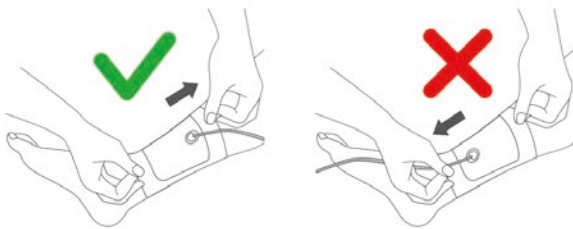

Die Schlauchverbindung des Drainageports nicht zum Boden hin ausrichten

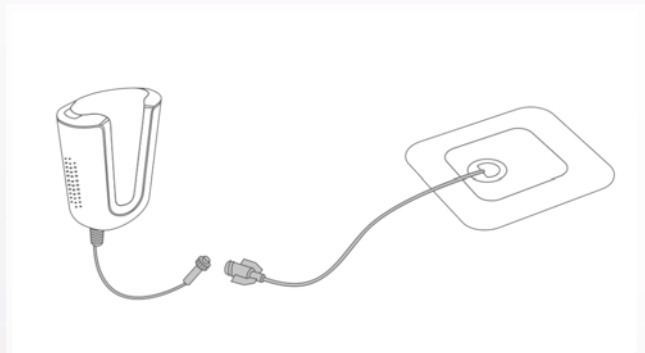

Den Schlauch der Pumpeinheit mit dem Wundverband verbinden

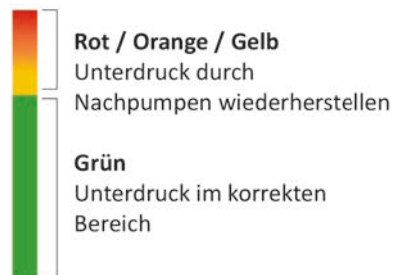


Nachjustieren des Unterdrucks durch die Pumpeinheit

MOBILE

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

INDIKATIONEN


DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS
ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC

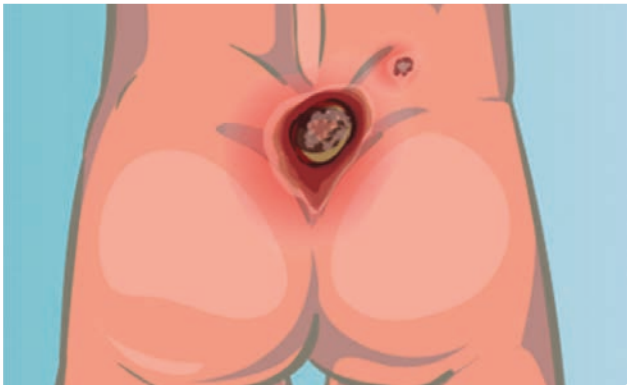

Druck-Ulcus



Haut-Transplantat

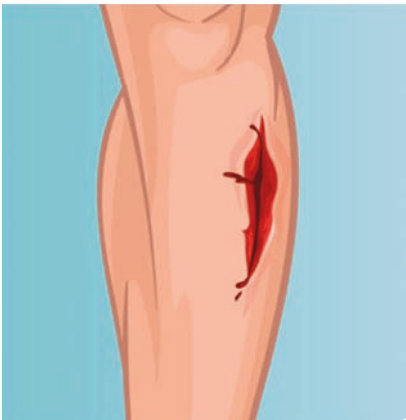

Subakute Wunde




Nahtwunde



Venöser Bein-Ulcus



Brandwunden

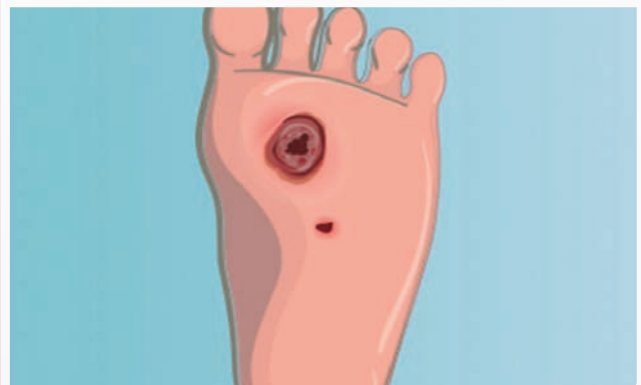

Diabetische Fuß-Ulcera

MOBILE

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

ANWENDUNGSHINWEISE

DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC



Reinigen des Wundbetts und der Haut um die Wunde



SIMO-Wundverband aus der sterilen Verpackung entnehmen



SIMO-Wundverband zentral über der Wunde positionieren – Drainageport oberhalb der Wunde über intakter Haut ausrichten



Schutzpapier auf beiden Seiten komplett entfernen



SIMO-Wundverband faltenfrei aufbringen – Falls erforderlich sind Korrekturen und Repositionierung problemlos möglich



Zur Unterstützung der Dichtigkeit kann – falls notwendig – Wundfolie zusätzlich verwendet werden



Verbindungsschlauch von der SIMO-Pumpe am SIMO-Wundverband anschließen



Pumphebel herausziehen und um 90° drehen – Anschließend so häufig wie erforderlich - etwa 2 – 4 Mal - pumpen bis die Farbanzeige auf grün bleibt



Unterdruck-Status:
 • Grüne Anzeige zeigt Vakuum an
 • Aussehen des Wundverbands lässt auf Dichtigkeit schließen

MOBILE

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

FALLBEISPIELE

DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC


Patientin 64 Jahre – Furunkel am rechten Schenkel



Tag 1



Tag 23

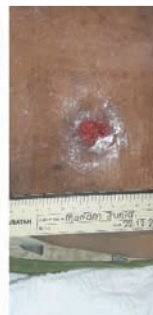

Tag 34



Tag 48

Patient mit schwer heilender Wunde



Tag 1



Tag 3



Tag 10

Patientin 64 Jahre – Sakraler Druck-Ulcus Kategorie 4



Tag 1



Tag 38



Tag 130



Tag 143

MOBILE

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

KALKULATIONSBEISPIELE

DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC

Wirtschaftlichkeits-Modell für Arztpraxen und Wundambulanzen

Primärer Wundverschluss
(Zuschlag zu einem Eingriff des Abschnitts 31.2)

Sachkosten

GOP 40900 (430,67 Euro):
Kostenpauschale im Zusammenhang mit der GOP 31401 oder 36401 (je durchgeführter Leistung)

(nicht zusätzlich abrechenbar zu den Gebührenpositionen 02314 (sekundärer Wundverschluss) und 36401)

GOP 31401

(68 Punkte / 7,47 Euro - einmal am Behandlungstag berechnungsfähig)

Abrechenbar durch Fachärzte für

- Chirurgie
- Kinderchirurgie
- Plastische und Ästhetische Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
- Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Urologie

Fallbeispiel 1 – Primärer Wundverschluss

Eingriff nach Abschnitt 31.2 mit Unterdruckwundversorgung

5 Tage Behandlungsdauer
1 Verbandswechsel = 2 Verbände gesamt

Abrechnungspositionen	Vergütung
1 x GOP 40900 - 430,67 € =	430,67 €
2 x GOP 31401 - 7,47 € =	+ 14,94 €

Materialkosten

1 x Starterkit mit 2 Wundverbänden ca.:	- 140,00 €
Überschuss ca.:	305,61 €

Dauerhaft außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) und somit extrabudgetär

Sekundärer Wundverschluss GOP 02314 (135 Punkte / 14,83 Euro

- Zusatzpauschale für die Vakuumversiegelungstherapie zum intendierten sekundären Wundverschluss - einmal am Behandlungstag)

EBM-Abschnitt 2.3 (kleinchirurgische Eingriffe)

Sachkosten

GOP 40901 (65,49 Euro):
Kostenpauschale im Zusammenhang mit der GOP 02314 bei einer Wundfläche bis einschließlich 20 cm² (je durchgeführter Leistung, höchstens dreimal in der Kalenderwoche

Alternativ

GOP 40902 (71,39 Euro):
bei einer Wundfläche größer 20 cm²

GOP 40903 (47,54 Euro):
Kostenpauschale für die Vakuumpumpe im Zusammenhang mit der GOP 02314 (je Kalendertag)

Abrechenbar durch Fachärzte für

- Allgemeinmedizin
- Innere und Allgemeinmedizin
- Praktische Ärzten
- Ärzten ohne Gebietsbezeichnung
- Innere Medizin ohne Schwerpunktbezeichnung, die gegenüber dem Zulassungsausschuss ihre Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gemäß § 73 Abs. 1a SGB V erklärt haben
- Chirurgie
- Kinderchirurgie
- Plastische und Ästhetische Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
- Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Innere Medizin und Angiologie
- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Urologie
- Vertragsärzten mit der Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der Bezeichnung „Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“ oder der Zusatzweiterbildung Phlebologie

Fallbeispiel 2 – Sekundärer Wundverschluss

Eingriff nach EBM-Abschnitt 2.3 (kleinchirurgische Eingriffe) mit Unterdruckwundversorgung

Wunde < 20 cm²
30 Tage Behandlungsdauer
10 Verbandswechsel = 11 Verbände gesamt

Abrechnungspositionen	Vergütung
GOP 02314 - 11 x 14,83 € =	163,13 €
GOP 40901 - 11 x 65,49 € =	+ 720,39 €
GOP 40903 - 30 x 47,54 € =	+ 1.426,20 €

Materialkosten

1 x Starterkit mit 2 Wundverbänden ca.:	- 140,00 €
3 x Dressingkit = 9 Wundverbände ca.:	- 360,00 €
Überschuss ca.:	1.809,72 €



Dauerhaft außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) und somit extrabudgetär

MOBILE


CADITEC

MEDICAL + TECHNIC GMBH

UNTERDRUCK- WUNDTHERAPIE

BESTELLINFORMATIONEN

DAS MOBILE ANSCARE™ SIMO NPWT-SYSTEM VON BENQ MATERIALS ZUR UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE IM VERTRIEB DURCH CADITEC

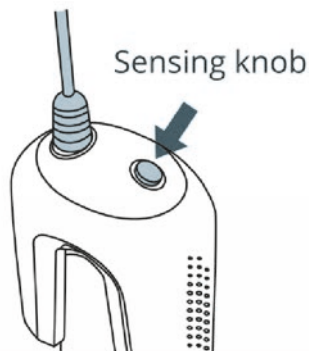

Wenn der Drucksensor / Druck-Kontrollknopf er-
tastet werden kann, muss der Unterdruck nach-
reguliert werden.



Das Muster auf dem Wundverband verschwindet
bei Absorption des Exsudats allmählich. Wenn
ca. ¼ des Musters verschwunden sind, sollte der
Wundverband gewechselt werden.

Spezifikation Pumpeinheit

Abmessungen: **8,5 x 7 x 3,3 cm**
Gewicht: **< 88g**
Unterdruck: **125 mmHg (kontinuierlich)**

Absorptionsvolumen Wundverbände

5 x 8 cm 20 ml	10 x 10 cm 60 ml	10 x 15 cm 80 ml	10 x 20 cm 100 ml
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Artikelnummer	Artikel	Stück pro VE
NP-3-1	SIMO NPWT System mit Halter 1 Unterdruck-Pumpsystem + 2 Wundsets (steril) 10 x 10 cm + Halterung	1
NP-3-2	SIMO NPWT System mit Halter 1 Unterdruck-Pumpsystem + 2 Wundsets (steril) 10 x 20 cm + Halterung	1
NP-3-3	SIMO NPWT System mit Halter 1 Unterdruck-Pumpsystem + 2 Wundsets (steril) 5 x 8 cm + Halterung	1
NP-3-4	SIMO NPWT System mit Halter 1 Unterdruck-Pumpsystem + 2 Wundsets (steril) 10 x 15 cm + Halterung	1
NP-2-1	3 Wundsets (steril): 10 x 10 cm	1
NP-2-2	3 Wundsets (steril): 10 x 20 cm	1
NP-2-3	3 Wundsets (steril): 5 x 8 cm	1
NP-2-4	3 Wundsets (steril): 10 x 15 cm	1

Caditec Medical + Technic GmbH

Killianstraße 22
55543 Bad Kreuznach



Zentrale: **0671 303 29**

Fax: **0671 92 03 59 44**

info@caditec-medizintechnik.de