


Unvereinbares kombinieren





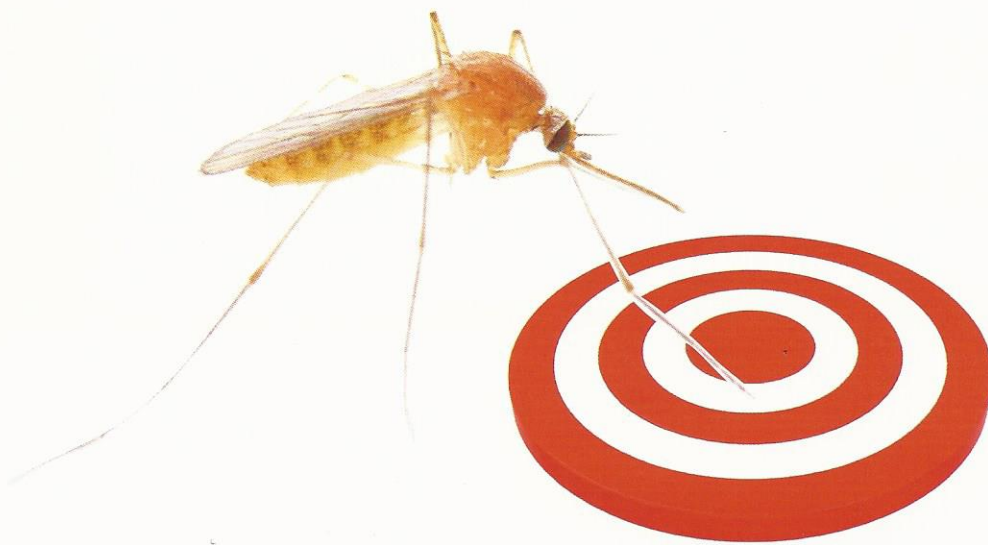

Die Micro-Tip® Spinalnadeln
von Caditec


... minimiertes Dura-Trauma

... hohe Punktionsgenauigkeit

... ausgezeichneter Liquorrückfluss

Das spezielle Design der Micro-Tip® Spinalnadeln mit zwei Nadeldurchmessern innerhalb derselben Kanüle ermöglicht es, ein minimales Dura-Trauma bei gleichzeitig hoher Punktionsgenauigkeit zu erreichen. Dies geht einher mit einem ausgezeichneten Liquorrückfluss zur schnellen Erfolgskontrolle. Die Micro-Tip® Spinalnadel bietet daher eine ideale Kombination der folgenden Vorteile:

-  Das Dura-Trauma und damit der postspinale Kopfschmerz werden minimiert durch einen auf 27G reduzierten Spitzenbereich, der sich über nur ca. 2 cm erstreckt.
-  Eine ausgesprochen hohe Punktionsstabilität und Punktionsgenauigkeit werden durch einen 22G starken Schaftbereich gewährleistet.
-  Der extrem schnelle Liquorrückfluss durch das sich erweiternde Innenlumen ermöglicht eine unmittelbare Erfolgskontrolle und reduziert das Risiko von Technik-Versagern.
-  Die Zentimetermarkierung auf der Nadel bietet zusätzliche Sicherheit durch die ständige Kontrolle der Eindringtiefe.

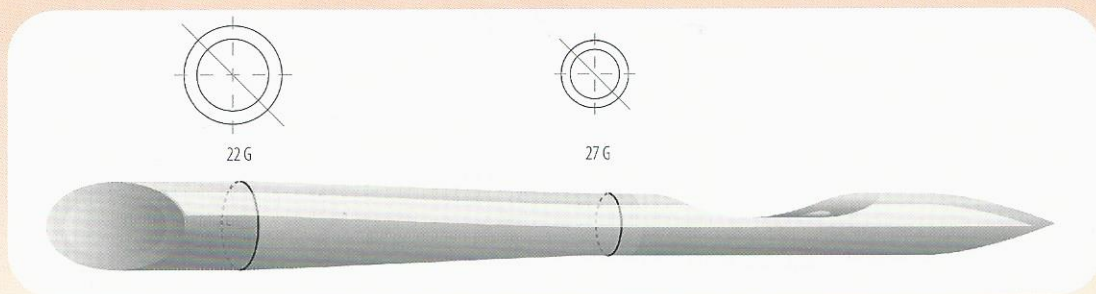

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Vorstechkanüle	Farbcode	VE
29922-27	22/27 G	90 mm	30 mm	schwarz/grau	25 Stk.
21922-27	22/27 G	103 mm	38 mm	schwarz/grau	25 Stk.
31922-27	22/27 G	140 mm	42 mm	schwarz/grau	25 Stk.

